

VOCO Profluorid[®] Varnish

ZAWIERAJĄCY FLUOR LAKIER DO
DESENSYTYZACJI ZĘBÓW

VOCO Profluorid® Varnish

WYSOCE SKUTECZNY

Nadwrażliwość

Nadwrażliwość zębów stanowi istotny problem dla bardzo wielu osób. Wśród objawów dominuje zazwyczaj przejściowy ból zęba, o którym pacjent nie wspomina nawet stomatologowi. Najczęstszą przyczyną nadwrażliwości jest obnażenie kanałków zębiny. Leczenie musi więc polegać na ich uszczelnieniu.

Wskazania


Profluorid Varnish to zawierający fluor lakier do desensytyzacji zębów wskazany w leczeniu nadwrażliwości zębów. Umożliwia on skuteczne uszczelnienie obnażonych kanałków zębiny na powierzchni szyjek zębowych lub opracowanego ubytku.

Składniki i skuteczność lakieru VOCO Profluorid® Varnish

Bazę preparatu Profluorid Varnish stanowi kalafonia z dodatkiem 5 % fluorku sodu (22.600 ppm fluoru). Jony fluorkowe reagują z jonami wapnia zgromadzonymi w kanałkach zębiny, co powoduje wytrącanie się złożeń fluorku wapnia, który skutecznie uszczelnia kanałki. Badania prowadzone przez stomatologów wykazały, że już jedna aplikacja lakieru Profluorid Varnish pozwoliła na eliminację dolegliwości bólowych u 85 % pacjentów.



Poza wyjątkowo szybkim uszczelnianiem kanałków zębiny Profluorid Varnish powoduje również wytrącanie fluorku wapnia na powierzchni zęba. Złogi te stanowią ochronę przed działaniem kwasów, ułatwiają remineralizację, a w dalszej perspektywie przyczyniają się do tworzenia fluoroapatytów. Ksylitol, substancja o udowodnionym działaniu kariostatycznym, poprawia właściwości smakowe preparatu.

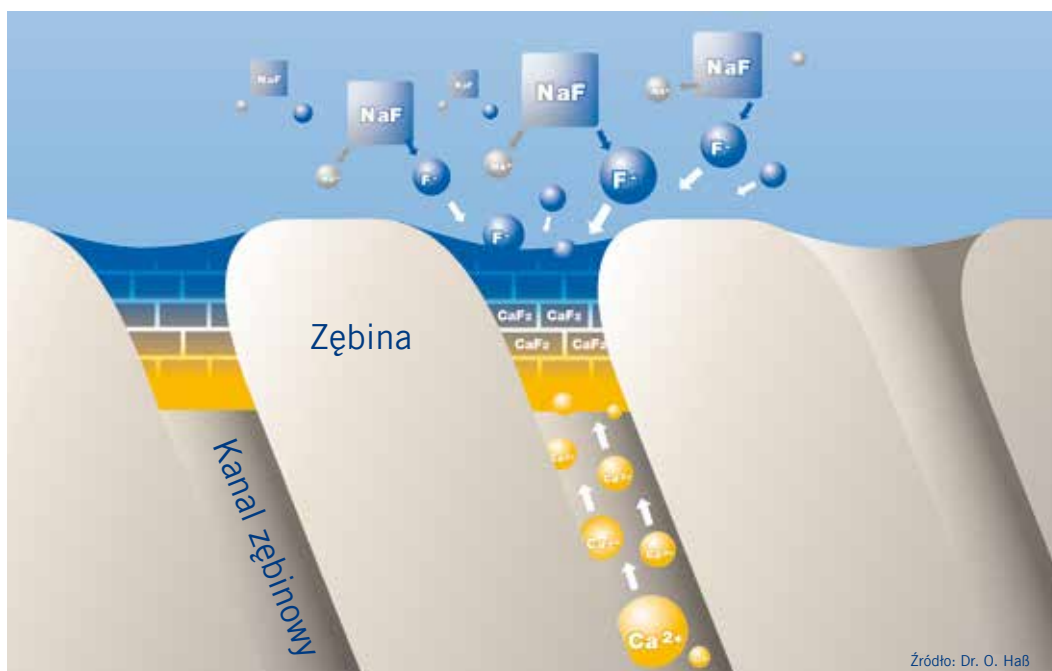

VOCO Profluorid® Varnish


PROSTE I ESTETYCZNE

Prostota aplikacji

Dzięki matrycy zawierającej kalafonię Profluorid Varnish bardzo dobrze przylega nawet do wilgotnych powierzchni, nie ma więc potrzeby suszenia powierzchni zęba przed jego aplikacją. Poprawia to istotnie współpracę z pacjentami, którzy mogą mieć problem z wykonywaniem zaleceń (np. dzieci).

Estetyka i smak

Profluorid Varnish jest lakierem w naturalnym odcieniu zęba, który nie wpływa negatywnie na estetykę uzębienia. Poza ksylitolem w skład preparatu wchodzi również substancja o smaku melona poprawiająca smak i zapach lakieru. Zwiększa to akceptację preparatu, zwłaszcza przez dzieci.

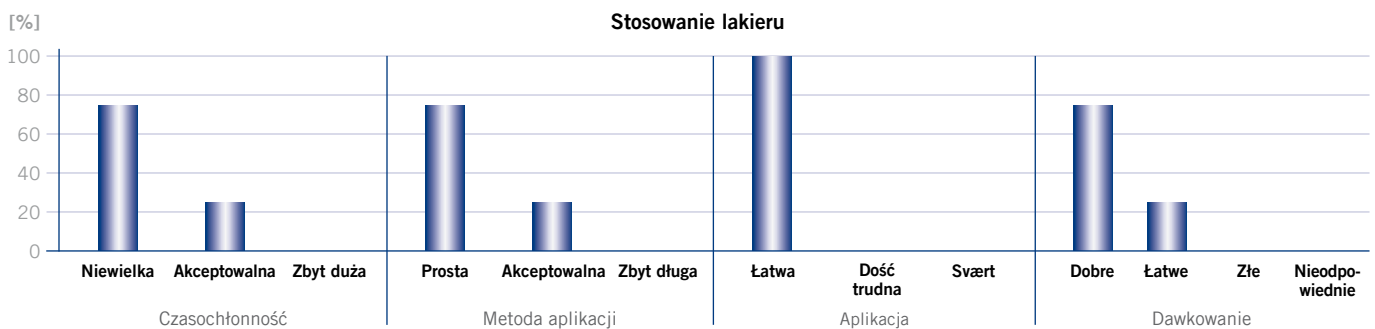

Wyniki badań stomatologów testujących preparat

Opinia stomatologów

Wszyscy stomatolodzy stosujący Profluorid Varnish ocenili jego właściwości estetyczne oraz aplikację jako dobre. Większość stomatologów donosiła nawet o wyraźnej różnicy między Profluorid Varnish a preparatami konkurencyjnych firm na korzyść lakieru firmy VOCO. Profluorid Varnish przypadł

również do gustu pacjentom. Prawie wszyscy z ankietowanych pacjentów zgłaszali istotną poprawę albo całkowite ustąpienie objawów nadwrażliwości.

Profluorid Varnish to coś więcej niż tylko kwestia dobrego smaku!

Prosta i estetyczna desensytyzacja zębów z VOCO Profluorid® Varnish



Zalety opakowań typu *SingleDose*

Profluorid Varnish w opakowaniach typu *SingleDose* dostępny jest w blisterach zawierających jednocześnie pędzelek do aplikacji i lakier. Pozwala to na aplikację produktu w idealnie higienicznych warunkach.

Aplikacja z kartuszy



Zalety kartuszy

Sprawdzone i wypróbowane kartusze pozwalają nanosić materiał z precyzyjną dokładnością oraz przeprowadzić fluoryzację całego łuku zębowego za jednym podejściem.

VOCO Profluorid® Varnish

TWÓJ WYBÓR

Wskazania

Leczenia nadwrażliwości zębów

Zamykania i uszczelniania kanalików zębinowych podczas preparacji ubytku oraz w przypadkach nadwrażliwości odsłoniętych powierzchni korzenia zęba

Zalety

- Łatwość aplikacji na wilgotnych powierzchniach
- Estetyczny, biało-przezierny kolor naturalnego zęba
- Szybka desensytyzacja i uwalnianie fluorków (5 % NaF \triangleq 22.600 ppm fluoru)
- Dostępny w czterech smakach: melonowym, miętowym, wiśniowym i karmelowym

Zalety SingleDose

- Produkt i aplikator w higienicznym, jednorazowym opakowaniu
- Bez dodatkowego oprzyrządowania
- Nie wycieka

Zalety kartuszy

- Możliwość wielokrotnego użycia wraz z jednorazową kaniulą
- Idealnie precyzyjna aplikacja
- Wyjątkowa łatwość aplikacji w przestrzeniach międzyzębowych
- Fluoryzacja całego łuku zębowego za jednym podejściem



Formy sprzedaży

Smak	SingleDose 48 x 0,40 ml	SingleDose 50 x 0,25 ml	SingleDose 50 x 0,40 ml	SingleDose 200 x 0,40 ml	Tuba 10 ml	Tuba 50 ml	Pojemnik 5 x 1,70 ml
Melonowy	–	REF 1268	REF 1269	REF 1271	REF 1267	REF 1272	REF 2235
Karmelowy	–	–	REF 2226	REF 2229	REF 2232	–	–
Wiśniowy	–	–	REF 2227	REF 2230	REF 2233	–	–
Miętowy	–	–	REF 2228	REF 2231	REF 2234	–	–
Mixed	REF 2225	–	–	–	–	–	–
REF 2167	Końcówki aplikacyjne typ 43, 100 szt.						

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.com/pl

Do nabycia w: