

**D.** D e v i c e s

Advanced systems for dental devices

**D. SEALING MACHINE**

## Spis treści


1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
2. Wprowadzenie
3. Specyfikacja
4. Instrukcja obsługi
5. Konserwacja
6. Zawartość opakowania
7. Gwarancja na produkt

## 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zasilanie wejściowe: 230 V (50/60 Hz). Przed podłączeniem zasilania należy kompatybilne przed podłączeniem zasilania.
- Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do zainstalowania zgrzewarki.
- Nie wkładać rolki sterylizacyjnej, dopóki nie będzie gotowa do użycia.
- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi. Przechowywać instrukcję obsługi w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Przed podróżą należy odłączyć wtyczkę zasilania.

## Definicje

Definicje różnych symboli używanych na zgrzewarce znajdują się na jej etykiecie. etykietce.

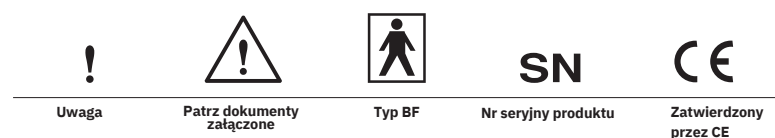

Uwaga

Patrz dokumenty  
załączone

Typ BF

Nr seryjny produktu

Zatwierdzony  
przez CE

## 2. Wprowadzenie

Zgrzewarka D\_sealing jest przeznaczona do użytku w klinice dentystycznej. Instrumenty dentystyczne powinny być przechowywane w antybakteryjnym pudełku lub zapieczętowane w sterylnych opakowaniach. Zgrzewarka jest niezbędna i niezwykle przydatna do pakowania instrumentów. D\_sealing działa dobrze na interfejsie wiążącym dzięki dokładnej kontroli temperatury.

## 3. Specyfikacja

- Moc wejściowa: 230V~, 50/60Hz
- Moc znamionowa: 100W
- Temperatura zgrzewania: 200°C ± 10°C
- Maks. długość uszczelnienia: 280 mm
- Szerokość uszczelnienia: 12 mm
- Waga netto: 4,8 kg
- Waga brutto: 7 kg
- Rozmiar opakowania: 50 x 40 x 21 cm

## 4. Instrukcja obsługi

Podłącz przewód zasilający i włącz przełącznik zasilania.

Po włączeniu zasilania zaczniesz migać zielone światło. Wstępne nagrzewanie trwa ok. 3 minuty.

Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy zielone światło przestanie migać i pozostanie stałe.

Włóż rolkę sterylizacyjną, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona. (Patrz poniżej dla prawidłowego pozycjonowania).

Naciśnij uchwyt oznaczony do przodu lub do tyłu przez 3 sekundy, urządzenie wyemituje alarm urządzenia wyemituje alarm "DI", a żółte światło pozostanie włączone podczas zamykania instrumentów.

Jeśli uchwyt nie zostanie zwolniony po 6 sekundach, urządzenie wyemituje ciągły alarm "DI".

## 5. Konserwacja

- Czyszczenie: Wytłóż urządzenie i wytrzyj je miękką szmatką.

- Wymiana ostrza:

1. Odkręć śrubę mocującą uchwyt za pomocą klucza imbusowego D3 (część #1)
2. Odkręć pozostałe 6 śrub za pomocą śrubokręta krzyżakowego (części #2, #3 i pozostałe).
3. Zdjąć plastikową osłonę z boku (część 4).
4. Zdjąć część z ostrzem (część 5).
5. Odkręć śrubę 6 za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego. 6.
6. Zdjąć płytkę ostrza 7.
7. Wymienić ostrze 8.
8. ponownie zamontować wszystkie części.

**Uwaga:** Przed wymianą ostrza upewnij się, że urządzenie ostygło.

Przed wymianą ostrza należy upewnić się, że urządzenie ostygło. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z ostrym ostrzem.

## 6. Zawartość opakowania

Nr.	Nazwy części	Ilość
1	D_sealing Zgrzewarka do folii	1 szt.
2	Kabel sieciowy	1 szt.
3	Rolka sterylizacyjna (próbka)	1 m
4	Ostrze	1 szt.
5	Instrukcja obsługi	1 szt.

## 7. Gwarancja produktu

Zgrzewarka jest objęta roczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne.

wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użytkowania lub celowego złego użytkowania.