

## PROPHYflex 4

Zmień zabieg w czystą przyjemność.





# Dwa urządzenia w jednym – idealne do zabiegów naddziąstowych i poddziąstowych.

Nowa piaskarka PROPHYflex 4 to wszechstronne urządzenie do wielu zastosowań. Można jej używać do pracy ze wszystkimi rodzajami zębów, wszystkich pacjentów i prawie w każdym wskazaniu, bez względu na to, czy chodzi o obszar nad- czy poddziąstowy.

## Naddziąstowo.



### Wygodnie leży w dłoni.

Ergonomię obsługi i swobodne, bezstresowe przeprowadzanie zabiegów można sobie zapewnić wybierając odpowiednią dla siebie długość rękojeści.



### Skoncentrowany na czystej przyjemności.

Zminimalizuj ilość rozpylanej mgiełki z wody i proszku, korzystając z jednolitego, skoncentrowanego strumienia, który pozwala chronić strukturę zębów.



### Możliwość regulacji mocy

Dzięki trzem poziomom regulacji można samodzielnie dostosować skuteczność czyszczenia, prowadząc je zarówno bez użycia proszku, jak i z maksymalną jego ilością.

## Poddziąstowo.




### Koniec z biofilmem.

Skoncentrowany strumień umożliwia wyjątkowo precyzyjną pracę, a dzięki zgłębnikowi WHO daje również idealny ogląd kieszonek.



### Łagodny dla kieszonek.

Możliwość indywidualnego doboru długości rękojeści pozwala zachować większą delikatność podczas czyszczenia kieszonek, szczególnie w obszarach poddziąstowych.

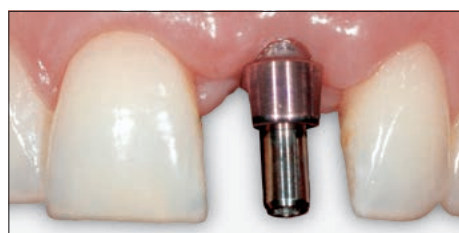

### Skoncentrowany strumień zapewnia wszechstronne narzędzie.

Końcówka Perio służy do zastosowań poddziąstowych, ale może być również wykorzystywana do czyszczenia implantów, koron i mostów oraz usuwania przebarwień na odstąpiętych szyjkach zębowych.

# Doskonała ergonomia jeszcze nigdy nie była tak wszechstronna...

Chcesz, aby codzienne zabiegi profilaktyczne były łatwiejsze, szybsze i dokładniejsze, a nawet przyjemniejsze podczas dłuższych wizyt? Nowa piaskarka PROPHYflex 4 firmy KaVo spełnia wszystkie te kryteria. Jest bardzo lekka, idealnie wyważona i ergonomicznie zaprojektowana, co umożliwi wygodną pracę.

## Wyjątkowe oczyszczanie i lepsza widoczność.

Mniejsza ilość rozpylanej mgiełki z wody i proszku dzięki wysoce precyzyjnemu strumieniowi. Wąska dysza zapewnia dobrą widoczność podczas oczyszczania naddziąsłowego.

## Wygoda w każdej pozycji.

Uchwyt dyszy umożliwiający obrót o 360° zapewnia wygodną pracę nawet w trudno dostępnych miejscach.

## Odpręż się i pracuj swobodnie.

Niezwykle lekka, idealnie wyważona rękojeść z możliwością indywidualnego doboru długości zapewnia komfortową obsługę i bezstresowe przeprowadzenie zabiegu.



## Rekomendowana przez lekarzy.

„Nowa piaskarka PROPHYflex 4 znacząco ułatwia moją codzienną pracę – idealnie leży w dłoni dzięki dwóm długościom uchwytu dyszy. Pozwala też kontrolować strumień proszku i wody, co doceniają również moi pacjenci”.

### Tanja Wicharz

Specjalistka od profilaktyki i instruktorka szkoleń dotyczących prowadzenia gabinetu.



## ...a wszechstronność jeszcze nigdy nie prowadziła do takiego komfortu.

Wiemy, że nie ma dwóch takich samych dłoni, zabiegów ani pacjentów, więc piaskarkę PROPHYflex 4 firmy KaVo można dostosować do własnych potrzeb. Stomatolog decyduje o tym, czy zabieg dotyczy obszaru pod- czy naddziąstowego, czy usuwane będą łagodne czy silne przebarwienia, czy zastosuje więcej lub mniej proszku oraz jakiej długości końcówka będzie najbardziej odpowiednia.

### **Precyzyjna, niewielka dysza do czyszczenia kieszonek.**

Opcjonalny zestaw Perio przeznaczony do przeprowadzania precyzyjnych i łagodnych zabiegów poddziąstowych, jak również czyszczenia mostów, implantów i koron.

### **Dostosowany do potrzeb.**

Dwa uchwyty różnej długości pozwalają idealnie dopasować narzędzie do dłoni. Bardzo wygodne również w przypadku, gdy kilka osób korzysta z tej samej piaskarki.

### **Gwarancja bezpieczeństwa.**

Stabilna pozycja przy napętnianiu dzięki płaskiej podstawie zbiorniczka. Aby uniknąć przerywania zabiegu, pojemnik można napętnić wcześniej a następnie zamknąć go gumowym wieczkiem z oznaczeniem o wybranym wskazaniu.

### **Więcej oznacza lepiej.**

Trzy stopnie regulacji – pierwszy z nich umożliwia irygację zębów w celu usunięcia pozostałości proszku. Poziom 2 i 3 pozwalają dostosować moc czyszczenia w zależności od pacjenta i wskazania.

### **Lepsza kompatybilność.**

Podłączenie za pomocą złączki KaVo albo Sirona.



Najczystsza przyjemność.  
Przed zabiegiem, w jego trakcie i po nim.



W celu zapewnienia najwyższego poziomu higieny obudowa piaskarki PROPHYflex 4 jest pozbawiona łączeń. Piaskarkę PROPHYflex 4 można łatwo rozłożyć na części, wyczyścić i zdezynfekować oraz wysterylizować.

Prognoza na przyszłość:  
mniejsze zapalenie.



Skoncentrowany, nieprzerwany strumień proszku i wody, który można regulować według potrzeb, umożliwia precyzyjne czyszczenie przy zminimalizowanym pyleniu.

Bezwzględna dla przebarwień,  
łagodna dla zębów.



Równomierny rozkład energii wzdłuż powierzchni strumienia ma dwie zalety: im bardziej równomierny jest rozkład, tym skuteczniej przebiega czyszczenie, a struktura zębów jest lepiej chroniona.

\* \*Działanie na szkliwo proszku PROPHYpearls w porównaniu z konkurencyjną piaskarką wykorzystującą węglan wapnia. Sprawdzono na kompozycie SonicFill™.

## Mój sposób na największą niezawodność.

„Po każdym zastosowaniu i przed każdym przygotowaniem należy podłączyć piaskarkę PROPHYflex 4 do szybkozłączki i płukać wodą przez minutę, a następnie odłączyć dopływ wody. Gwarantuje to, że w urządzeniu nie zostały resztki proszku, które mogłyby je zablokować. Pozostałości zalegające w urządzeniu PROPHYflex 4 można również wydmuchać, korzystając z pierwszego stopnia trzystopniowej regulacji. Przygotowanie piaskarki do kolejnego zabiegu nie zajmuje dużo czasu”.




**Annett Preuß**

Specjalista Sprzedaży, Dział  
Instrumenty, KaVo Kerr Niemcy



Kolorowa profilaktyka:  
wybierz kolor, który  
najbardziej Ci pasuje.

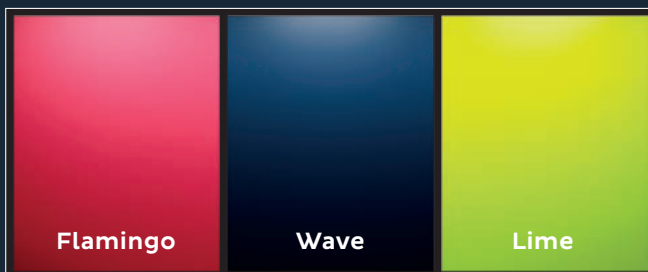

Piaskarka PROPHYflex 4 dopasowuje się do Twojej dłoni i Twojego stylu życia. PROPHYflex 4 jest dostępna w tych trzech intensywnych kolorach i stanowi niezbędne wyposażenie każdego gabinetu.

Nie marnuj czasu:  
zamykane pojemniki na proszek.



Pojemniki na proszek z zamkniętym wieczkiem: idealnie nadają się do zabiegów, w których ilość proszku musi być zgodna ze wskazaniem. Wystarczy przymocować napętniony wcześniej pojemnik i rozpocząć pracę.


## Liczy się też to, co jest w środku: kolekcja proszków dla PROPHYflex 4.

PROPHYpearls, PROPHYflex i PROPHYflex Perio to proszki idealnie nadające się do stosowania w połączeniu z piaskarką PROPHYflex 4, umożliwiające dokładne, a zarazem delikatne czyszczenie.





### Proszek KaVo PROPHYpearls: delikatna skuteczność.

- Wskazania: skuteczne usuwanie przebarwień, osadu i biofilmu.
- Substancja czynna: węglan wapnia o ziarnistości 60-70  $\mu\text{m}$ , biodegradowalny, nie zawiera soli, cukru ani glutenu.
- Najważniejsze informacje: okrągły kształt i jednolity rozmiar umożliwiają optymalne czyszczenie przy minimalnej abrazji; dostępny w czterech smakach i dwóch wariantach neutralnych.

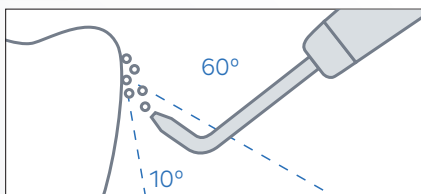


### Proszek KaVo PROPHYflex: większa ścieralność.

- Wskazania: szybkie usuwanie przebarwień, osadu i biofilmu.
- Substancja czynna: dwuwęglan sodu o ziarnistości 60-70  $\mu\text{m}$ , rozpuszczalny w wodzie.
- Najważniejsze informacje: prosty i szybki zabieg w czterech możliwych smakach.

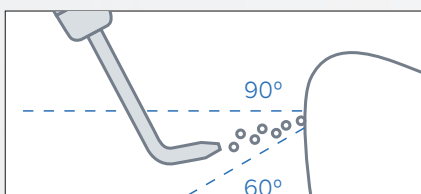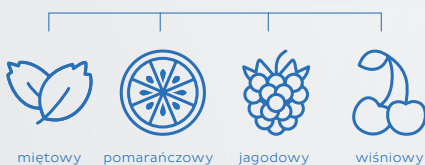



# Tylko jedno urządzenie w gabinecie: zabiegi w obszarze poddziąstwowym z wykorzystaniem piaskarki PROPHYflex 4.

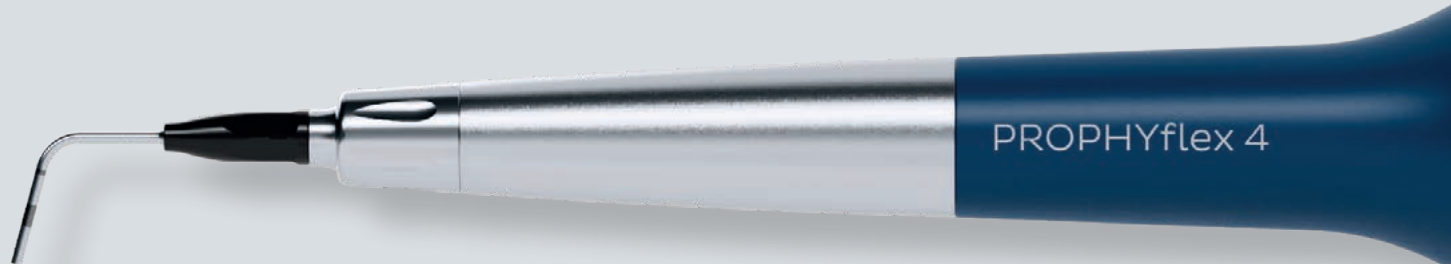

## Dysza Perio i proszek Perio do zabiegów w obszarach poddziąstwowych.

Dzięki PROPHYflex 4 nie ma już konieczności korzystania z innego urządzenia podczas przechodzenia z obszaru poddziąstwowego do naddziąstwowego lub czyszczenia implantów. Wystarczy zamocować końcówkę Perio, wypełnić pojemnik proszkiem Perio, wybrać właściwy poziom mocy – i gotowe.


- Bezpieczne, ukierunkowane czyszczenie kieszonek za pomocą stabilnej, cienkiej końcówki Perio z oznaczeniem głębokości.
- Doskonała dostępność dzięki dobrej widoczności i smukłemu kształtowi.
- Higieniczne końcówki, wielokrotnego użycia: każdą można przygotować do 10 cykli sterylizacji.



## Proszek KaVo PROPHYflex Perio: do zastosowań pod- i naddziąstwowych.

Wskazania: skuteczna kontrola biofilmu w kieszonek przyzębnych oraz czyszczenie koron, mostów i implantów.

- Substancja czynna: drobny proszek glicynowy (18–22  $\mu\text{m}$ ) chroniący dziąsła.
- Najważniejsze informacje: delikatny i nieabrazyjny, do skutecznego czyszczenia kieszonek oraz implantów w zastosowaniach naddziąstwowych.

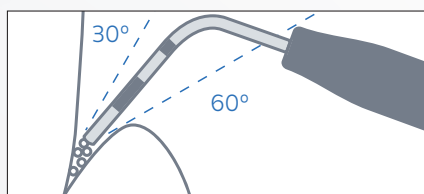

# Zabiegi przy pomocy piaskarki KaVo PROPHYflex 4 są kluczowym elementem programu KaVo Kerr „Świat pełen uśmiechu”



Uśmiech rodzi się z czystego szczęścia: system piaskowania firmy KaVo stanowi fundament prowadzonego przez firmę KaVo Kerr programu „Świat pełen uśmiechu”. Ergonomiczna i łatwa w regulacji piaskarka KaVo PROPHYflex 4 idealnie współgra z proszkami PROPHYpearls, PROPHYflex oraz zestawem Perio PROPHYflex i proszkiem Perio.

Zadowolenie z prowadzenia zabiegów profilaktycznych jest możliwe również dzięki innym produktom KaVo i Kerr: od przygotowania pacjenta w celu osiągnięcia najlepszej widoczności, przez produkty do delikatnego i dokładnego skalingu i rozwiązania do polerowania zębów, aż po innowacyjne urządzenia do wczesnego wykrywania próchnicy bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich.

Wszelkie informacje, materiały wideo i aktualności można znaleźć na stronie: [www.kavo.com/pl/PROPHYflex4](http://www.kavo.com/pl/PROPHYflex4)





#### **Optymalne przygotowanie pacjenta dzięki retractorowi Kerr OptiView™.**

Elastyczna trójwymiarowa budowa retractora OptiView firmy Kerr umożliwia jego szybkie i wygodne zakładanie i zdejmowanie. Równomierne odciągnięcie warg i policzków zapewnia doskonałą widoczność i swobodny dostęp do jamy ustnej. Umożliwia nieprzerwane i skuteczne wykonywanie czynności, nawet podczas dłuższych zabiegów, zapewniając wygodę zarówno pacjentom, jak i lekarzom.



#### **Skuteczny skaling dzięki końcówkom SONICflex firmy KaVo.**

Niezależnie od rodzaju zabiegu system SONICflex umożliwia szybką i łatwą wymianę końcówki, komfortowy i łagodny przebieg dla tkanek, jak również mniejsze nagrzewanie i łagodną oscylację we wszystkich wskazaniach.



#### **System KaVo gwarancją łatwego piaskowania.**

System czyszczenia zębów firmy KaVo umożliwia skuteczne piaskowanie: nowa, ergonomiczna i łatwa w regulacji piaskarka KaVo PROPHYflex 4 z dedykowanym proszkiem PROPHYpearls i proszkiem PROPHYflex lub zestawem Perio PROPHYflex i proszkiem Perio, daje powód do uśmiechu przy każdym zastosowaniu, zarówno stomatologom, jak i pacjentom.



#### **Skuteczne polerowanie zębów dzięki rozwiązaniom firmy KaVo Kerr.**

Współpraca KaVo i Kerr – trzy kątńce KaVo SMARTmatic do leczenia profilaktycznego w połączeniu z produktami firmy Kerr: gumkami Pro-Cup™ służącymi do nakładania pasty profilaktycznej Cleanic™ bez rozpryskiwania przy pomocy praktycznych klipsów Prophy Clips – umożliwia wyjątkowo skuteczne polerowanie zębów.



#### **Przeznaczona do diagnostyki próchnicy kamera DIAGNOcam firmy KaVo.**

Korzystając z kamery DIAGNOcam firmy KaVo we wczesnym wykrywaniu próchnicy można w łatwy sposób uzyskać bardzo dokładny obraz, przeprowadzając transiluminację zębów bez konieczności stosowania promieni rentgenowskich. Dzięki doskonałej jakości obrazom łatwiej uzyskać akceptację zaproponowanego planu leczenia.

# Dental Excellence – doskonałość w każdym obszarze stomatologii.



## Wyposażenie gabinetu

Unity i lampy stomatologiczne, systemy komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne oraz dodatkowe urządzenia KaVo.



## Instrumenty

Prostnice i kątnice stomatologiczne, turbiny, piaskarki oraz drobne urządzenia do wszystkich zastosowań, w tym diagnostyki, profilaktyki, stomatologii zachowawczej, chirurgii, endodoncji oraz konserwacji instrumentów.



## Obrazowanie

RTG wewnętrzne, radiowizjografia, rozwiązania typu All-in-one: pantomografia, cefalometria i CBCT oraz zaawansowane tomografy 3D do wszystkich typów wskazań w stomatologii.



## CAD/CAM

Stomatologiczne rozwiązania CAD/CAM dla zapewnienia estetycznych, naturalnych i trwałych efektów stomatologii odtwórczej, odpowiednie dla dentystów i techników dentystycznych.

Produkty, urządzenia i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu mogą być dostępne tylko w wybranych krajach. Zamieszczone specyfikacje są zgodne z aktualną wiedzą obowiązującą w czasie ich publikacji. Firma KaVo Dental GmbH nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru na ilustracjach, pomyłki lub błędy w druku oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie, także w części, jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.