

SYSTEM

zetaplus



Clinical

C-Silicone Impression Material

Zhermack 
Dental

zetaplus system

Rozwiązanie dla każdej sytuacji klinicznej.

Firma ZHERMACK potwierdza sukces linii materiałów ZETAPLUS SYSTEM.

ZETAPLUS SYSTEM, ceniona od 25 lat na całym świecie seria preparatów utrzymała na przestrzeni czasu wysokie właściwości kliniczne i stałą niezawodność umożliwiającą osiągnięcie najlepszych rezultatów w protetyce.

zetaplus

zetaplus soft

oranwash L

thixoflex M

oranwash VL

ZMNIĘSZENIE MARGINESU BŁĘDU

› **Widoczny kontrast kolorystyczny między składnikami zmniejsza ryzyko błędu** i pozwala na **oszczędność czasu i materiału**.

OPTYMALNIE DOBRANE PARAMETRY

- › **Idealne proporcje** między czasem pracy a czasem wiązania (efekt **snap-set**).
- › **Optymalne dozowanie** katalizatora, które umożliwia maksymalnie długi czas pracy i zmniejsza skurcz wycisku.

EFEKT "FLOW CONDITIONING"

› Zwiększona **płynność i wysoka stabilność wymiarowa** dzięki zastosowaniu technologii ładunków sferycznych o dużej aktywności SAS (Synthetic Amorphous Silicas).

zetaplus system

Niezwykłe precyzyjne wyciski dzięki efektowi “flow conditioning”

ZETAPLUS, ORANWASH L i THIXOFLEX M

ZETAPLUS, początkowa płynność i wysoka końcowa twardość

Efekt “flow conditioning” zwiększa **płynność** materiału i **zmniejsza ucisk** na dziąsła. ZETAPLUS, ze względu na swoją **twardość końcową** jest zalecana jako masa na pierwszą warstwę wycisku w technice wycisku dwuwarstwowego.

ORANWASH L, płynność i hydrofilność

Hydrofilna masa wyciskowa, o wysokiej płynności, polecana jest jako masa korekcyjna w technice wycisku dwuwarstwowego.

THIXOFLEX M, tiksotropowość, płynność i hydrofilność

Tiksotropowa masa wyciskowa, o szczególnie **płynnej** konsystencji zapewnia precyzyjne **odtworzenie detali** w wilgotnym środowisku jamy ustnej dzięki wysokiej hydrofilności. Polecana w technice wycisku jednoczasowego.



Płynność dzięki efektowi “flow conditioning”



Płynność i wnikanie do kieszonek dziąsłowych

ZETAPLUS SOFT i ORANWASH VL

ZETAPLUS SOFT, płynność i elastyczność


Płynna i elastyczna masa na pierwszą warstwę wycisku jest idealna w każdej sytuacji klinicznej, a szczególnie jest zalecana w technice wycisku dwuwarstwowego jednoczasowego.




Optymalna twardość

ORANWASH VL, duża płynność i hydrofilność

Hydrofilna i o dużej płynności masa korekcyjna jest idealna do wszystkich technik wyciskowych.

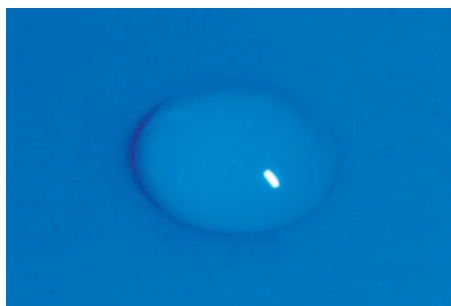

Hydrofilność po upływie 1 minuty

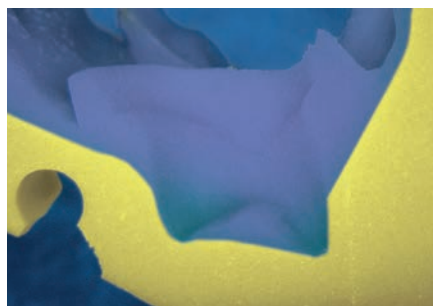


Płynność w trakcie pracy

Indurent Gel i Zetaplus system

Idealny kontrast kolorystyczny.

Katalizator **INDURENT GEL** zapewnia uzyskanie **jednorodnej konsystencji przy mieszaniu z masą bazową jak i masami korekcyjnymi ZETAPLUS SYSTEM.**

Idealne proporcje między czasem pracy a czasem wiązania

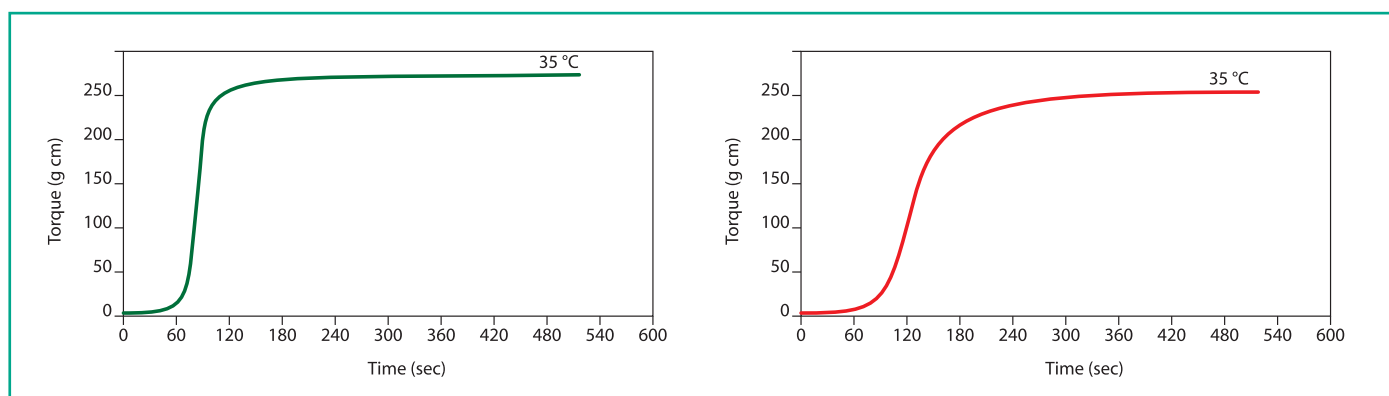

Efekt SNAP-SET (zetaplus - zetaplus soft)

Efekt SNAP-SET (oranwash VL – oranwash L)

DANE TECHNICZNE	ZETAPLUS	ZETAPLUS SOFT	ORANWASH VL	ORANWASH L	THIXOFLEX M
Czas mieszania	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	30 sec.
Całkowity czas obróbki	1 min. 15 sec.	1 min. 15 sec.	1 min. 30 sec.	1 min. 30 sec.	2 min.
Pozostawienie w jamie ustnej	3 min. 15 sec.	3 min. 15 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.	3 min. 30 sec.
Czas zastygania	4 min. 30 sec.	4 min. 30 sec.	5 min.	5 min.	5 min. 30 sec.
Odształcenie pod wpływem ściskania (min./maks)	2% - 5%	2% - 5%	2% - 8%	2% - 8%	2% - 8%
Odzyskanie elastyczności	> 98%	> 98%	> 99%	> 99%	> 99%
Stabilność wymiarów	< -0,2%	< -0,2%	< -0,7%	< -0,7%	< -0,7%

Wydajność ZETAPLUS SYSTEM



zetaplus system
Niezawodność w każdej sytuacji.

Zhermack 
Dental

SYSTEM**zetaplus****Opakowanie**

C100600 ZETAPLUS	1 pojemnik 900 ml/1.53 Kg + miarka
C100312 ZETAPLUS	1 pojemnik 1800 ml/3 Kg + miarka
C100468 ZETAPLUS	1 pojemnik o poj. 10 Kg + miarka
C100730 ZETAPLUS INTRO KIT L	1 pojemnik Zetaplus, 900 ml/1.53 Kg + miarka + 1 tubka Oranwash L, 140 ml + 1 tubka Indurent gel, 60 ml + podkładki do mieszania
C100720 ZETAPLUS TRIAL KIT L	1 pojemnik Zetaplus, 200 ml + miarka + 1 tubka Oranwash L, 40 ml + 1 tubka Indurent gel, 60 ml + podkładki do mieszania
C100610 ZETAPLUS SOFT	1 pojemnik, 900 ml/1.53 Kg + miarka
C100740 ZETAPLUS SOFT INTRO KIT VL	1 pojemnik Zetaplus Soft, 900 ml/1.53 Kg + miarka + 1 tubka Oranwash VL, 140 ml + 1 tubka Indurent gel, 60 ml + podkładki do mieszania
C100650 ORANWASH VL	1 tubka, 140 ml
C100660 ORANWASH L	1 tubka, 140 ml
C100670 THIXOFLEX M	1 tubka, 140 ml

Katalizatory

C100700 INDURENT GEL	1 tubka o poj. 60 ml o konsystencji żelu
----------------------	--

Osprzęt

C303230 ALGHAMIX II	Mechaniczne mieszadło do alginatów i silikonów (230 V)*
C303215 ALGHAMIX II	Mechaniczne mieszadło do alginatów i silikonów (115 V)*

Akcesoria

C207200	Szpatułka do silikonu z nierdzewnej stali, laminowana, może być sterylizowana – 1 szt
C303020	Podkładki do mieszania – 1 bloczek zawiera 20 arkuszy
C303030	Krążek do mieszania silikonu z 3 podkładkami do mieszania na Alghamix
C207201	Podkładki do mieszania na Alghamix: 20 arkuszy
D510010	Putty cut

*Krążek do mieszania silikonów dostępny również oddzielnie

BRANCHES**GERMANY**

Zhermack GmbH Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
 +48 22 292 71 17
 F +48 22 642 07 14
 biuro@zhermack.com
 www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
 P.O. Box 4195, River Edge
 New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
 +1 (732) 389 8540
 F +1 (732) 389 8543
 info@zhermackusa.com
 www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
 T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack