

# Tetric EvoFlow<sup>®</sup>

Kompozyt płynny



**Płynny** kiedy tego potrzebujesz.  
**Stabilny** kiedy tego oczekujesz.

**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation






## Nowy wygląd sprawdzonego produktu

Płynne kompozyty są to produkty, które mają duże znaczenie w nowoczesnej stomatologii. Są one niezastąpione, gdy pożądaną cechą materiału jest duże powirowactwo do powierzchni ubytku, w czym Tetric Evo Flow® zdecydowanie się wyróżnia. Najlepiej sprzedający się, płynny kompozyt w Europie, ze swoją popularną konsystencją, jest teraz dostępny w nowym, ergonomicznym opakowaniu. Poddany długoterminowym badaniom, Tetric EvoFlow®, jest materiałem o wysokiej jakości, co zostało potwierdzone przez dr Eduardo Mahn, dyrektora Clinical Research, Universidad de los Andes, Santiago, Chile.



Dr Eduardo Mahn

„Kiedy muszę sprostać trudnemu przypadkowi klinicznemu mogę zawsze polegać na odpowiednich, płynnych właściwościach Tetric EvoFlow, a jednocześnie stabilnej konsystencji tego materiału. Kompozyt jest wygodny w aplikacji i pozwala na osiągnięcie estetycznych rezultatów wysokiej jakości. ”

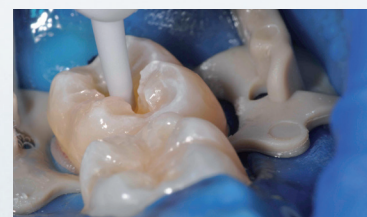

Zdjęcia: Dr Eduardo Mahn, Santiago, Chile.

Tetric EvoFlow należy do linii produktów typu Tetric. Niezależnie od tego czy potrzebujesz kompozytu do modelowania o regularnej gęstości czy też materiału o płynnej konsystencji, linia ta oferuje odpowiednią opcję do każdego wskazania.

### KOMPOZYTY DO MODELOWANIA

Nakładane w kilku warstwach

#### Tetric EvoCeram®

Kompozyt warstwowy

Kompozyt, który był sprawdzony ponad milion razy. Dostępny w odcieniach: 4 odcieniach zębinowych 14 odcieniach szklivnych 4 odcieniach do zębów wybielonych

Nakładane w jednej warstwie

#### Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Kompozyt typu Bulk Fill

Wydajne i estetyczne wypełnienia zakładane i utwardzalne w 4mm warstwie w zębach bocznych. Dostępny w odcieniach odpowiadających kolorom A i B oraz W do zębów wybielonych

### KOMPOZYTY PŁYNNE

Nakładane w kilku warstwach

#### Tetric EvoFlow®

Kompozyt płynny

3 nowe odcienie

Dostępny w odcieniach: 3 odcieniach zębinowych 8 odcieniach szklivnych 3 odcieniach do zębów wybielonych



## Nowe cechy materiału

Tetric EvoFlow jest dostępny w dwóch różnych opakowaniach: jednorazowych opakowaniach typu Cavifil z bardzo cienkimi końcówkami aplikacyjnymi lub strzykawkach. Strzykawki są bardzo wygodne w użytkowaniu ze względu na ich nowy, ergonomiczny kształt.

Aby zapewnić precyzyjną aplikację, Tetric EvoFlow został wyposażony w nową, 0,9-mm metalową końcówkę aplikacyjną. Smukłe aplikatory są idealne do wypełniania małych ubytków w trudno dostępnych miejscach. Ponadto, końcówki są łatwe do założenia na strzykawkę dzięki systemowi Luerlock. Gładkie przejście końcówki aplikacyjnej w strzykawkę jest łatwe do utrzymania w czystości.



## Uzupełnienie gamy kolorów o trzy nowe odcienie

Sprawdzony zakres kolorów materiału Tetric EvoFlow został poszerzony o następujące odcienie: B1 Enamel, A2 Dentin i B2 Dentin. Odcień B1 jest szczególnie przydatny do jaśniejszych zębów. Materiały zębinowe ze względu na swoją naturalną nieprzezierność, mogą być stosowane do maskowania jasnych plam w zębach bocznych.


Tetric EvoFlow może być stosowany w połączeniu z innymi materiałami kompozytowymi takimi jak: Tetric EvoCeram® i Tetric EvoCeram® Bulk Fill. Wówczas materiał może być używany np. jako liner pod kompozyt o regularnej lepkości.





## Wyjątkowo dobre właściwości dotyczące kontrastu na zdjęciach RTG

Warunkiem, który decyduje o trafnym zdiagnozowaniu próchnicy wtórnej jest odpowiedni kontrast na zdjęciach rtg. Tetric EvoFlow daje kontrast na poziomie 360% Al, tzn. jest nieprzepuszczalny dla promieniowania rentgenowskiego w takim zakresie. Tym samym ułatwia to klinicyście prawidłowo odróżnić twarde tkanki zęba od materiału wypełniającego.

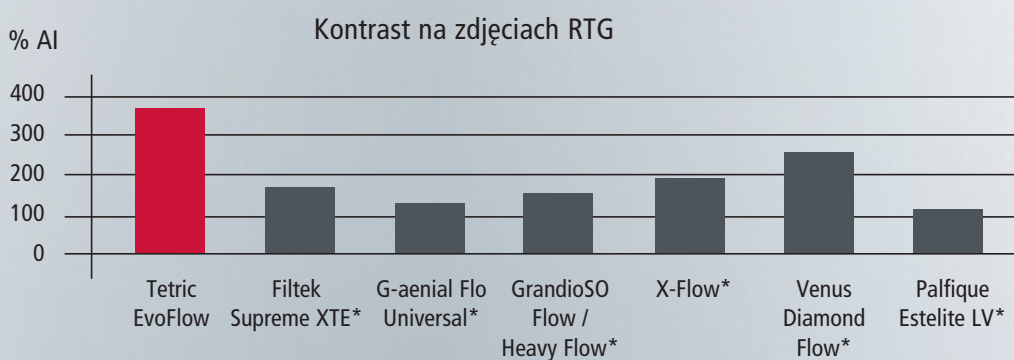

R & D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012 (mierzone wg. ISO 4049)

\*Te znaki towarowe nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ivoclar Vivadent AG.






## Zarówno płynny jak i stabilny

Tetric EvoFlow charakteryzuje się optymalnym powinowactwem do powierzchni, a jednocześnie dużą stabilnością. W rezultacie, materiał zapływa wszędzie tam, gdzie potrzeba, a jednocześnie pozostaje stabilny kiedy jest to konieczne. Za to zachowanie materiału odpowiedzialny jest tzw. Kontroler Lepkości, który reguluje płynność materiału.

Dodatkową zaletą tego materiału jest to, że pod wypełnieniem, nie pozostają żadne puste przestrzenie, nawet przy wypełnianiu trudno dostępnych ubytków.

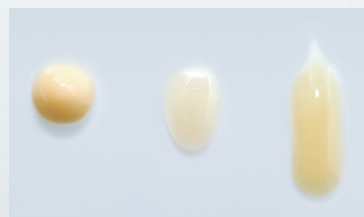


Sytuacja początkowa: Tetric EvoFlow (z lewej), SDR \* Flow (po środku) i Palfique Estelite LV \*(z prawej) materiały zostały nałożone na pionowo ustawioną płytkę szklaną.

Sytuacja po pięciu minutach

R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012.

\*Te znaki towarowe nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Ivoclar Vivadent AG.

## Idealna konsystencja do wszystkich wskazań

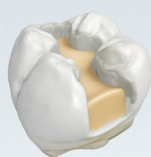

Pierwsza warstwa (liner) pod wypełnienia kompozytowe wykonane z materiałów złożonych o regularnej lepkości np. TetricEvoCeram/ Tetric EvoCeram Bulk Fill w ubytkach klasy I,II,III,IV,V



Wszystkie rodzaje małych wypełnień (klasy III i V)



Poszerzone uszczelnianie bruzd

### Zalety w skrócie

- ▶ Płynny jeśli trzeba, stabilny jeśli to konieczne
- ▶ Doskonała konsystencja dla wszystkich zastosowań kompozytu
- ▶ Najlepiej sprzedający się w Europie płynny kompozyt
- ▶ Sprawdzone zakres kolorów, teraz poszerzony o trzy nowe odcienie.



## OPAKOWANIA

### Tetric EvoFlow

#### Strzykawki

##### Assortment 8 x 2 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T  
1 x kolornik Tetric EvoFlow  
40 x końcówki 0.9-mm

##### Refill, 1 x 2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3  
T, A3.5 Dentin,  
Bleach XL, Bleach L, Bleach M  
5 x końcówki 0,9-mm

**Nowość:** B1, A2 Dentin, B2 Dentin,  
kończówki 0,9-mm

Kolornik we wszystkich 14 odcieniach

#### Cavifils

##### Assortment 40 x 0.2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T  
1 x kolornik Tetric EvoFlow

##### Refill, 20 x 0.2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3  
T, A3.5 Dentin,  
Bleach XL, Bleach L, Bleach M

**Nowe odcienie:** B1, A2 Dentin, B2 Dentin  
Kolornik we wszystkich 14 odcieniach

### Tetric EvoCeram

#### Strzykawki

##### Assortment 8 x 3 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3  
1 x kolornik Tetric EvoCeram

##### Refill, 3 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,  
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,  
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

##### Refill, 1 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,  
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,  
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Kolornik we wszystkich 22 odcieniach

#### Cavifils

##### Assortment 40 x 0.2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3  
1 x kolornik Tetric EvoCeram

##### Refill, 20 x 0.2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3,  
A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin, T,  
Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

### Tetric EvoCeram Bulk Fill

#### Strzykawki

##### Refill, 1 x 3 g lub 3 x 3 g

IVA, IVB, IVW

Kolornik we wszystkich 3 odcieniach

#### Cavifils

##### Refill, 20 x 0.2 g each

IVA, IVB, IVW



Powyższy produkt należy do pola kompetencji "Kompozyty". Wszystkie produkty tego obszaru są ze sobą kompatybilne.